


FICHA TÉCNICA

— — — —



Cama Eléctrica Pediátrica CT8k

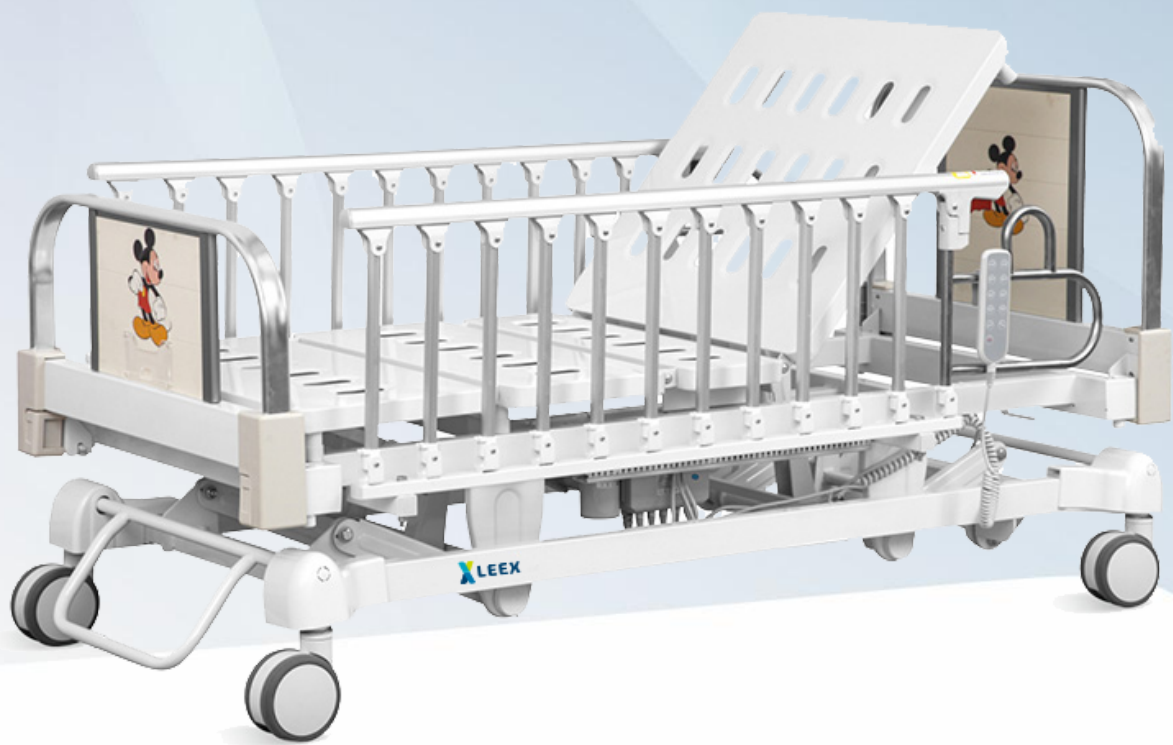

La cama eléctrica CT8k está diseñada para soportar los procedimientos de cuidados de terapia intensiva en pacientes pediátricos. Proporcionando al personal una mayor eficiencia y facilidad de manejo. Otorgándole seguridad al paciente con las barandas y conformidad gracias a su diseño adaptado a todo tipo de pacientes pediátricos.

CARACTERÍSTICAS

- **Cama de 5 movimientos** de funcionamiento totalmente eléctrico brindando eficiencia y facilidad de manejo.
- **Ruedas con freno central:** sus cuatro ruedas de doble cara de 5" de diámetro, bloqueables simultáneamente por el pedal de paso en ambos lados, permite maniobrar la cama con mayor comodidad.
- **Barandales enteros y abatibles:** permiten el fácil acceso al paciente.
- **Ajuste de altura:** hace su operatividad más sencilla, facilitando el trabajo del personal.
- **Movimiento del respaldo y de rodillas:** la elevación puede ser de hasta 75° en el caso del respaldo y hasta 35° en caso de las rodillas, generando conformidad en el paciente de ser necesario.
- **Trendelenburg y Antitrendelenburg** con ángulo de inclinación de hasta 12°.



ELEVACIÓN
DE ALTURA



TRENDELENBURG



ANTI-
TRENDELENBURG



ELEVACIÓN DE
PIERNAS



INCLINACIÓN DE
RESPALDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimensiones externas | 1800x780x480-770 mm (incluidas las barandillas) |
| Ajuste de altura | 480-770 mm |
| Dimensiones internas | 1890 x 640 mm |
| Respaldo | 0-75° (±10°) |
| Ajuste de rodilla | 0-35° (±10°) |
| Trendelenburg | 0-12° |
| Antitrendelenburg | 0-12° |
| Carga de trabajo segura | 170 Kg |
| Altura de barandas | 40 cm |
| Espacio entre barandas | 8,1 cm |

Configuración

| Estándar | Adicional |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• 5 Movimientos de accionamiento eléctrico• Ruedas de 5" con freno central (4 piezas)• Barandal lateral de aleación de aluminio (1 juego)• Extremos de aleación de aluminio (1 juego)• Previsión para porta suero (4 piezas)• Porta suero (1 pieza)• Gancho de drenaje (2 piezas) | Colchón (1580x650x100mm) |

Componentes

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | DISEÑO Con 12 barrales de aleación de aluminio, brindando seguridad y confort al paciente |  | RUEDAS Ruedas doble cara de 5" de suave deslizamiento. |
|  | CONTROL PARA ENFERMERA |  | SUPERFICIE DE LA CAMA Carga segura de hasta 170 kg. |
|  | FRENO CENTRAL Ruedas bloqueables simultáneamente por el pedal de paso de ambos lados. |  | PARACHOQUE Reduce el impacto de la colisión de manera segura. |
|  | PORTA SUERO Diseñado con acero inoxidable y plástico. |  | GANCHO DE DRENAJE Ganchos de drenaje móviles y de plástico. |